



SKG F7-E

Hordozható masszázspisztoly

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a SKG terméket választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket a következő egészségügyi készülékekkel együtt:
 - Beültetett szívritmus-szabályzó vagy egyéb beültethető egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Mesterséges szív vagy tüdő vagy egyéb élet-fenntartó egészségügyi elektronikai eszköz.
 - EKG és egyéb egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Benzinkutak, magas portartalmú üzemek, gáz és egyéb gyúlékony, robbanásveszélyes területen.
- Ha a felhasználó magas frekvenciájú sebészeti eszközt és a készüléket egyszerre használja a testén, az elektródák égési és egyéb károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készüléket rövidhullámú mikrohullámú terápiás eszköz közelében (1m) használja, a termék kimenete instabil lehet.
- A kezelés alatt kerülje, a készülék sebekkel és sérülésekkel történő érintkezését.
- A készülék használata során figyeljen rá, hogy a mellkason ne helyezze a szív közelébe.
- A készülék használata csak egy személy részére javasolt. Ha több személy használja, tisztítsa meg a fejeket új személy általi használat előtt.
- Ha a használat során vagy után kellemetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Az alábbi esetekben forduljon orvosához a termék használatba vétele előtt, különben balesetet vagy fizikai kényelmetlenséget okozhat:
 - Egészségügyi kezelés alatt álló és kényelmetlen érzéssel rendelkező beteg
 - Rendellenes szív és idegrendszerrel rendelkező beteg
 - 38 fokos testhőmérséklet felett (láz esetén)
 - Fertőző betegség esetén
 - Bőrérzékenység vagy egyéb bőr rendellenesség esetén
 - Gyógyszeres kezelés alatt álló beteg
 - Rendellenes vérnyomás esetén
 - Korlátozott cselekvő képesség esetén
 - A magas perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékszervi károsodásban szenvedő betegek.
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
 - Rosszindulatú daganat esetén
 - Kirschner drótos kezelést kapott betegek (soha ne használja semmilyen törött részen).
 - Csontritkulásban szenvedő betegek
 - Vénás trombózis vagy pulzáló betegség esetén
 - Magas vérnyomás esetén
 - Visszér probléma esetén
 - Vérékenység esetén
 - Állapotos nők, ágynyugalom esetén.
 - Állapotos nők óvatosan használják a készüléket, ne használják a has közelében.
 - Vesekővel rendelkezők esetén óvatosan használják a készüléket. Ne használja a vese közelében.
 - Akut gyulladással megbetegedés esetén
 - Szívritmus-szabályzóval rendelkező betegek esetén

- Fém implantátummal rendelkezők esetén
 - Szív közelében
 - Térdkalács, sípcsont, lábközépcsont, stb helyeken
 - Közvetlenül a gerincen, nyakcsigolyákon, arcizmokon
 - Ne használja üres gyomorral, teli gyomorral vagy ittasan
 - 4-5 percnél hosszabban egy területen
- Bármilyen ellenjavallat esetén egyeztessen az orvosával!
 - Ne használja a szív közelében, a nyak felett, fejen, szájon, genitáliákon, bőr rendellenességén, valamint a talpakon egyszerre. Továbbá ne nyomja a belső szerveket a használat során.
 - Bőrsérülések elkerülése érdekében ne használja a készüléket közvetlenül a bőrfelületen. Helyezzen száraz, tiszta ruhát vagy törölközőt a használni kívánt területre és óvatosan mozgassa a készüléket.
 - Ne használjon erős fokozatot a fejen vagy csont közelében. Csak lágy részeken használja, ha nincs fájdalom vagy kényelmetlen érzés.
 - Gyakori magas fokozaton, erős nyomással történő használat hámlást okozhat. Fájdalom vagy kényelmetlen érzés esetén hagyja abba a készülék használatát.
 - Ne használja együtt más egészségügyi termékkel vagy két terméknel többet egy időben.
 - Ne használja sérült vagy repedezett felületen.
 - A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. Nem okoz sérülést okozó interferenciát. Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
 - A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 - Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
 - Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatt és 40°C felett), valamint tűző napsugárzásnak.
 - Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
 - Tűz-, és balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizze használat előtt, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Ne használja a készüléket ha a töltő vagy az akkumulátor sérült.
 - A készülék nem játék! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tárolja, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
 - A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
 - Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
 - Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rá lépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
 - Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
 - Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
 - Ne használjon semmilyen illatosító anyagot a szűrőn. Az ilyen termékek gyúlékony vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek miatt a készülék kigyulladhat.
 - Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 - Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
 - Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
 - Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba, ne használja a készüléket bármelyik nyílás eltömődése esetén. Tartsa por, szősz, haj és egyéb tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást.

- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol az ujját, haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőkábelt használja. Más töltőkábel használata érvénytelenítheti a jótállást. A töltésre vonatkozó előírásokat szigorúan tartsa be!
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- Ne érintse meg a töltőt vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- NE dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- NE merítse vagy dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat bármilyen vízbe, sós vízbe vagy folyadékba.

Megjegyzések:

- Ha kényelmetlenséget vagy rendellenességet tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát azonnal!
- Ha a testen vagy bőrén furcsa érzést tapasztal, konzultáljon orvosával és kövesse az orvos utasításait.
- Ha készüléket használat közben más személyre helyezi, ellenőrizze, hogy az áthelyezés előtt a készüléket kikapcsolta.
- Ne használja elektronikai eszközök viselése közben.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és vegye le.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az USB kábelt nedves kézzel.
- Ne használja magas páratartalmú helységeben (pl. fürdőszoba) vagy fürdés közben.
- Ne használja alvás közben.
- Ne használja hosszú ideig egy területen (több, mint 5 percig).
- Masszázs közben ne érintkezzenek az elektródák övek, nyakláncok, stb. fém felületeivel.
- Viselje megfelelően a készüléket a nyaki gerincen.
- Az USB kábel eltávolításakor ne csak a kábelt húzza, hanem a csatlakozó végénél fogja meg a kábelt.
- Hosszabb idejű használat esetén a felület felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze, hogy a gomb megfelelően működik.
- Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, töltsen fel az akkumulátort.
- Ha nem használja tovább a terméket figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.

Javaslatok használatra:

- Pihenés erőnléti edzés után
- Rehabilitációs edzés
- Izomrostok ellazítása és a lágyrészek nyújthatóságának javítása
- Izomfájdalom és fáradtság
- Erőnléti edzés

Figyelmeztetések a melegítő funkcióval kapcsolatban

Alacsony hőmérséklet: több, mint 30 percig történő használat ugyanazon a területen alacsony hőmérsékletű forrázást eredményezhet.

Közepes hőmérséklet: több, mint 10 percig történő használat ugyanazon a területen alacsony hőmérsékletű forrázást eredményezhet.

Magas hőmérséklet: több, mint 1 percig történő használat ugyanazon a területen alacsony hőmérsékletű égési nyomokat eredményezhet.

A melegítés funkciót kellő körültekintéssel és óvatossággal használja az alábbi körülmények esetén:

- Fekély, égési seb, illetve bizonyos bőrbetegségek esetén a melegítés funkció használata szigorúan tilos!
- Érzékeny bőrrel rendelkezők kerüljék a melegítés funkció hosszabb használatát, mert az alacsony hőmérsékletű égési nyomokat eredményezhet.
- Az alábbi betegségekben szenvedők csak orvos felügyelete mellett használják a melegítés funkciót: magas vérnyomás, cukorbetegség, agyvérzés, agyideg rendellenesség, szív-, máj- és veseelégtelenség, stb.
- Állapotos nők ne használják a készülék melegítő funkcióját.
- Akut gennyes gyulladás, magas láz, eszméletlen, hőmérséklet érzékelési zavar vagy gyenge fizikai reagálási képesség esetén tilos a készülék melegítési funkciójának használata.
- Vérző vagy vérzékeny beteg számára tilos a készülék melegítési funkciójának használata.
- Akut lágyrészek, ficam, deformálódás, zúzódás vagy egyéb bőr alatti gyulladás esetén ne használja a melegítő funkciót 24-48 órán belül.
- Rendszeresen menstruációval rendelkező nők, méhvérzés, stb esetén a melegítő funkciót orvos felügyelete alatt használja.

JELLEMZŐK

Modell:	F7-E
Áramellátás:	Lithium-ion akkumulátor, 1800 mAh
Névleges feszültség:	5V
Névleges teljesítmény:	9W
Töltési mód:	USB Type-C
Méret:	112x49x159mm
Súly:	350g

Masszázs funkció:	Melegítés funkció:
1. szint: 600 fordulat/perc	1. szint: 42 °C
2. szint: 1200 fordulat/perc	2. szint: 48 °C
3. szint: 1800 fordulat/perc	3. szint: 53 °C
4. szint: 2400 fordulat/perc	
5. szint: 3200 fordulat/perc	

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

DOBOZ TARTALMA

- SKG F7-E masszázspisztoly
- USB-C kábel
- 4 db cserélhető masszázsfaj
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, building 3, zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:


WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu mstore.hu

KEZELŐSZERVEK

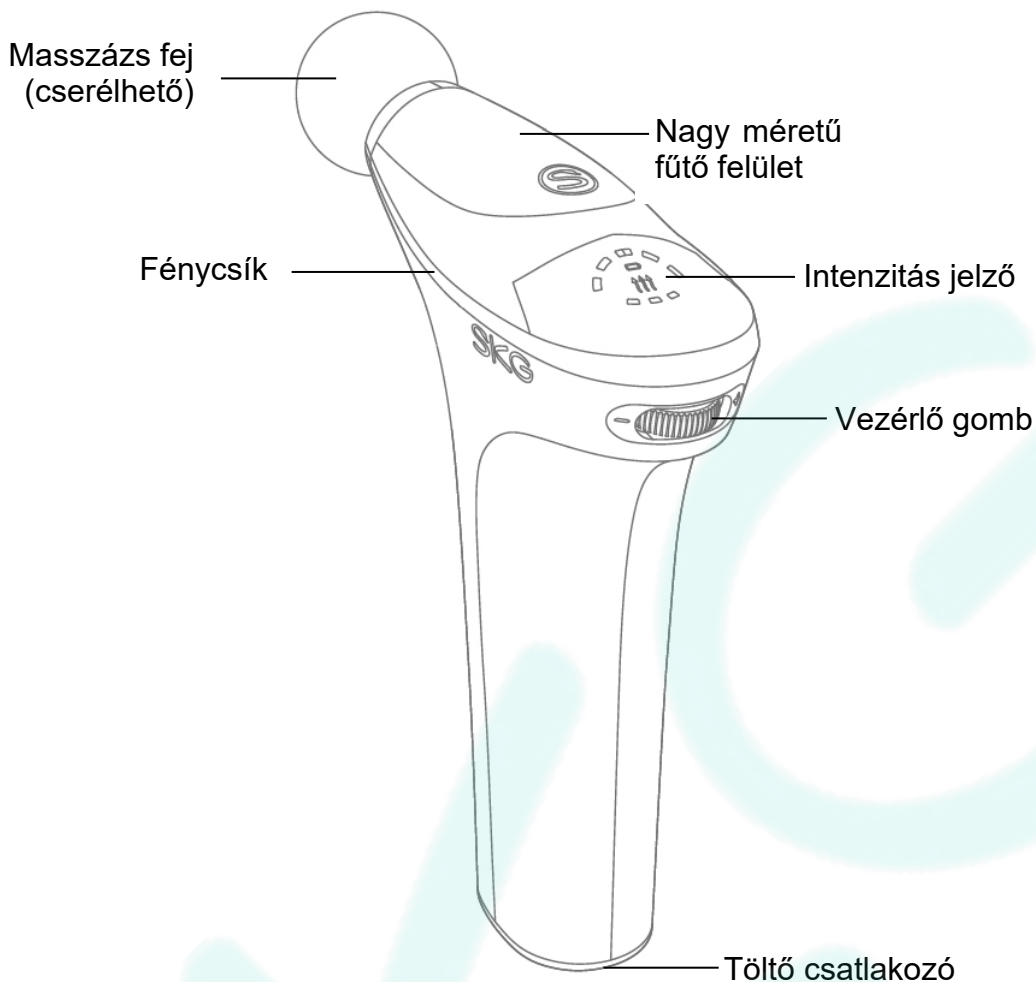

HASZNÁLAT




Be/kikapcsolás

Tartsa nyomva a vezérlő gombot a be vagy kikapcsoláshoz



Üzem mód váltó

Bekapcsolás után masszázs módba kerül a készülék; nyomja meg a vezérlő gombot a fűtő módra váltáshoz

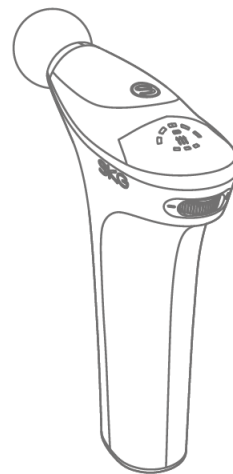

Intenzitás állítás

A megfelelő üzemmódra váltás után forgassa el a vezérlő gombot az intenzitás állításához. Balra forgatva csökkenti az intenzitást, jobbra növeli. Balra az utolsó állás készenléti állapotot jelent.

Masszázs fej				
Név	Spatula	Gömb-alakú	Kúp-alakú	Sima felületű
Intenzitás	●●●●	●●●	●●●●●	●●
Ismertető	Kemény anyagból készült, magas intenzitást végez. A testen keresztül húzódnó lineráris izmok relaxálására használható, pl: trapézizom, comb, kar és egyéb helyek	Puha anyagból készült, közepes intenzitást végez. Relaxálásra és masszázásra használható a testen keresztül húzódnó lineráris izmok esetén.	Fémről készült, maximális intenzitást végez. Mély relaxáláshoz használható helyileg nagy intenzitású edzés után.	Nagy érintkező felület. Nagy tömegű izmokhoz használható, mint pl hát, fenék, stb

Jelzőfények állapota

Jelzőfény	Állapot	Leírás
Fénycsík	Fehér	Be/kikapcsolás
	Mozgó kék	Masszázs módban magasabb szint, gyorsabb fénymozgás
	Folyamatos fehér	Készenlét
	Folyamatos narancs	Fűtő mód
	Villogó narancs	Elakadás jelzés
	Villogó vörös	Magas hőmérséklet jelzés
Tápellátás	Folyamatos kék	Energia szint $\geq 25\%$, megfelelő
	Folyamatos narancs	Energia szint $< 25\%$, kevés energia
	Villogó narancs	Töltés
	Villogó kék	Feltöltve

KARBANTARTÁS



Ne tegye ki közvetlen napfénynek!




Ne helyezze magas hőmérséklet és párák hely közelébe!




Tartsa távol nyílt lángtól és füsttől!



Védje a portól!

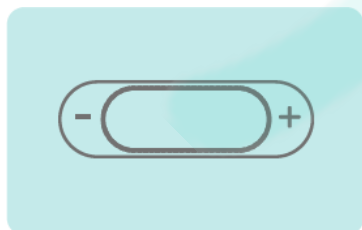

Kapcsoló

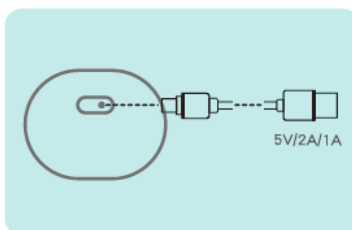

Ne használja töltés közben





Tárolja pormentes táskában

HULLADÉK-KEZELÉS

Akkumulátor

Támogassa az akkumulátor újrahasznosítását (lithium-ion akkumulátor)

 <p>Veszély</p>	<p>A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használja más termékekben! Ne töltsen fel a kiszereelt akkumulátort!</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne dobja tűzbe vagy melegítse fel!• Ne szúrja meg tűvel, üsse meg vagy próbálja meg szétszerelni!• Ne okozzon rövidzárlatot fém érintkezéssel!• Ne tárolja nyaklánc vagy hajtű mellett.• Ne töltsen, használja vagy helyezze tűz közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb magas hőmérsékletnek. <p>A fentiek melegeledést, tüzet vagy robbanást okozhatnak</p>
 <p>Figyelmeztetés</p>	<p>A kiszereelt akkumulátort gyermekek által nehezen elérhető helyen tárolja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Véletlen lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz!• Az akkumulátorból szivárgó folyadékot ne érintse meg és az alábbiak szerint kezelje:<ul style="list-style-type: none">○ Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék szembe kerül, az vakságot okozhat. Ne érintse meg a szemét közvetlenül a kezével. Mossa meg a szemét vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, irritációt és sérülést okozhat. Mossa meg vízzel és ha a kellemetlen érzés megmarad, azonnal forduljon orvoshoz.○ Csak selejtezés esetén bontsa meg az akkumulátort, melyet csak szakember végezhet! Ellenkező esetben sérülést, áramütést és tüzet okozhat. Javítási igény esetén forduljon szakszervizhez.

A készülékben használt lithium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak és értékes erőforrások. Ha az akkumulátor elhasználódott adja át megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetnek újrahasznosításra.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladék-kezelése esetén.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása előtt.
- Az akkumulátor eltávolításakor figyeljen a biztonsági előírásokra.