



## SKG W9 Pro Derékmasszírozó

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a SKG terméket választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket a következő egészségügyi készülékekkel együtt:
  - Beültetett szívritmus-szabályzó vagy egyéb beültethető egészségügyi elektronikai eszköz.
  - Mesterséges szív vagy tüdő vagy egyéb élet-fenntartó egészségügyi elektronikai eszköz.
  - EKG és egyéb egészségügyi elektronikai eszköz.
  - Benzinkutak, magas portartalmú üzemek, gáz és egyéb gyúlékony, robbanásveszélyes területen.
- Ne használja a készüléket vezetés, hegymászás vagy egyéb veszélyes tevékenység közben, mert balesetet okozhat.
- Ha a felhasználó magas frekvenciájú sebészeti eszközt és a készüléket egyszerre használja, a testen az elektródák helyén égési nyomok keletkezhetnek és egyéb károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készüléket rövidhullámú mikrohullámú terápiás eszköz közelében (1m) használja, a termék kimenete instabil lehet.
- A kezelés alatt kerülje, hogy az elektródák sebekkel és sérülésekkel érintkezzenek.
- A készülék használata során figyeljen rá, hogy a mellkason ne helyezze a szív közelébe.
- A készülék használata csak egy személy részére javasolt. Ha több személy használja, tisztítsa meg az elektródákat új személy általi használat előtt.
- Ha más személyre helyezi át a készüléket vagy arrébb helyezi az elektródákat masszázs közben, ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozást eltávolította, különben elektromos áramütés érheti.
- Használat során az elektródák szorosan érintkezzenek a bőrfelülettel a megfelelő hatékonysághoz.
- Ne használja a melegítő funkciót hosszú időn át (több, mint 20 perc), mert alacsony hőmérsékletű égést okozhat.
- Ha a használat során vagy után kellemetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Az alábbi esetekben forduljon orvosához a termék használatba vétele előtt, különben balesetet vagy fizikai kényelmetlenséget okozhat:
  - Egészségügyi kezelés alatt álló és kényelmetlen érzéssel rendelkező páciens
  - Rozsdamentes acél elektródákra allergiás betegek
  - Rendellenes szív és idegrendszerrel rendelkező páciens
  - 38 fokos testhőmérséklet felett (láz esetén)
  - Fertőző betegség esetén
  - Bőrérzékenység vagy egyéb bőr rendellenesség esetén
  - Gyógyszeres kezelés alatt álló páciens
  - Rendellenes vérnyomás esetén
  - Korlátozott cselekvő képesség esetén
  - A magas perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékszervi károsodásban szenvedő betegek.
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
  - Rosszindulatú daganat esetén
  - Vérzékenység esetén
  - Véralvadási rendellenesség esetén

- Állapotos nők
- Akut váladékkal járó gyulladós megbetegedés esetén
- Szívritmus-szabályzóval rendelkező betegek esetén
- Görcsös bénulás esetén
- Fél órán belül étkezés után.
- Rendellenes idegrendszeri stressz esetén
- Cerebrovaszkuláris balesetet követő görcsös fázisban lévő egyének
- Tisztázatlan tudatállapotú egyének, valamint végtag- és ízületi kontraktúras deformitások.
- A készüléket ne használja a derék alatt vagy a has alsó részén a terhesség kezdeti szakaszában.
- Fém implantátummal rendelkezők esetén
- Súlyos kognitív károsodás esetén
- Szív közelében
- A szemén
- Keringési rendellenességek, pl agyi érbetegségek, gyulladt vagy duzzadt bőr a nyakon, gennyesedés nyakkal kapcsolatos rendellenességek esetén, mert súlyosbíthatja az állapotot.
- 70 év feletti nem használhatják a készüléket. 65 év feletti alacsonyabb fokozaton használják csak a készüléket és figyeljenek a használati időtartamra, mert a bőrük kényesebb és az idegvégződéseik érzéketlenebbek lehetnek.
- Fokozatosan emelje a masszázsi erősségét a személyi komfortérzetnek megfelelően, mert a túl erős fokozattól izomláz okozta kellemetlen érzése támadhat.
- Ne használja a szív közelében, a nyak felett, fejen, szájon, genitáliákon, bőr rendellenességen, valamint a talpakon egyszerre. Továbbá ne nyomja a belső szerveket a használat során.
- Ne használja zsigeri szervek nyomására. Nem megfelelő használat balesetet és fizikai kényelmetlenséget okozhat.
- Ne használja együtt más egészségügyi termékkel vagy két terméknel többet egy időben.
- Ne használja sérült vagy repedezett felületen.
- Ne helyezze az elektródákat a koponyacsont közelébe, ha a beteg korábban agyi érrendszeri balesetet szenvedett.
- A készülék hőtermelő felülettel rendelkezik. Hőre érzékenyek óvatosan használják.
- A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. Nem okoz sérülést okozó interferenciát. Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatt és 35°C felett), valamint tűző napsugárzásnak.
- A készüléket és a tartozékait tárolja -20°C és +45°C közötti hőmérsékleten.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Tűz-, és balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizze használat előtt, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Ne használja a készüléket ha a töltő vagy az akkumulátor sérült.
- A készülék nem játék! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

- Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét, a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba, ne használja a készüléket bármelyik nyílás eltömődése esetén. Tartsa por, szősz, haj és egyéb tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- Ne érintse meg a töltőt vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, pl irattartó kapocs, pénzérme, kulcs, szögek vagy csavarok. Az akkumulátor érintkezőinek összezárása tűz és égés kockázatát rejti.
- Amennyiben a tápkábel, az adapter vagy az akkumulátor megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Sérülékeny feltételek esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést, mert bőrirritációt okozhat. Ha ez előfordul, öblítse le vízzel a bőrét. Ha a folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- NE dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- NE merítse vagy dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat bármilyen vízbe, sós vízbe vagy folyadékba.

#### Megjegyzések:

- Ha kényelmetlenséget vagy rendellenességet tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát azonnal!
- Ha a testen vagy bőrén furcsa érzést tapasztal, konzultáljon orvosával és kövesse az orvos utasításait.
- Ha készüléket használat közben más személyre helyezi, ellenőrizze, hogy az áthelyezés előtt a készüléket kikapcsolta.
- Ne használja elektronikai eszközök viselése közben.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és vegye le.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az USB kábelt nedves kézzel.
- Ne használja magas páratartalmú helységben (pl. fürdőszoba) vagy fürdés közben.
- Ne tárolja a készüléket -20°C alatti és 45°C feletti feletti helységben.
- Ne használja alvás közben vagy öntudatlan állapotú személyen.

- Melegre érzékenyek használják alacsony fokozaton és szigorúan figyeljenek oda a használati időtartamra.
- Ne használja hosszú ideig egy területen (több, mint 30 percig).
- Masszázs közben ne érintkezzenek az elektródák övek, nyakláncok, stb. fém felületeivel.
- Viselje megfelelően a készüléket a nyaki gerincen.
- Az USB kábel eltávolításakor ne csak a kábelt húzza, hanem a csatlakozó végénél fogja meg a kábelt.
- Hosszabb idejű használat esetén a felület felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze, hogy a gomb megfelelően működik.
- Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, töltsse fel az akkumulátort.
- Ha nem használja tovább a terméket figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.
- A készülék egy személyi masszázstermék és nem helyettesít gyógyszereket vagy egészségügyi eszközöket.
- Ne használja a nyakon kívül más testrészen.
- Használata 16 éves kor felett javasolt.

Ne tárolja vagy használja a készüléket az alábbi körülmények esetén:

- Közvetlen napfény
- Erős elektromágneses sugárzás
- Forró és párás helyen
- Vibrálásra és rázásra érzékeny helyeken
- Víz közelében
- Tűz közelében
- Nagy portartalmú helységben

## JELLEMZŐK

Modell:	W9 Pro
Teljesítmény:	10W
Névleges feszültség:	5V
Akkumulátor:	2450 mAh / 9,07 Wh

*\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

## DOBOZ TARTALMA

- SKG W9 Pro derékmasszírozó
- USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

### **Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)**

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

### **Minőségtanúsítás**

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

**IMPORTŐR:**

***WayteQ*** 


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222


Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [wayteq.eu](http://wayteq.eu) [mstore.hu](http://mstore.hu)

# KEZELŐSZERVEK


## Előlnézet

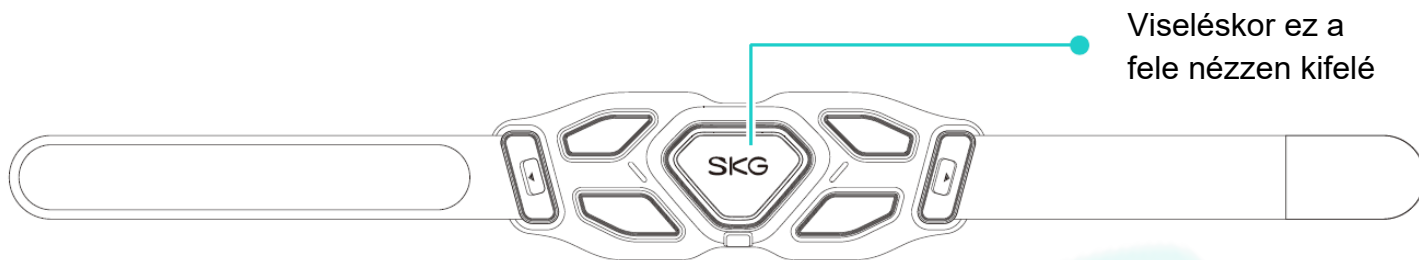

## Hátul nézet

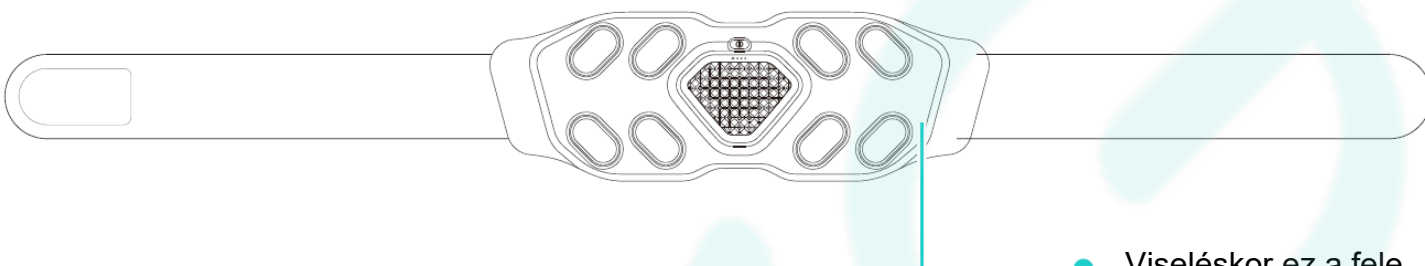

## Masszírozó

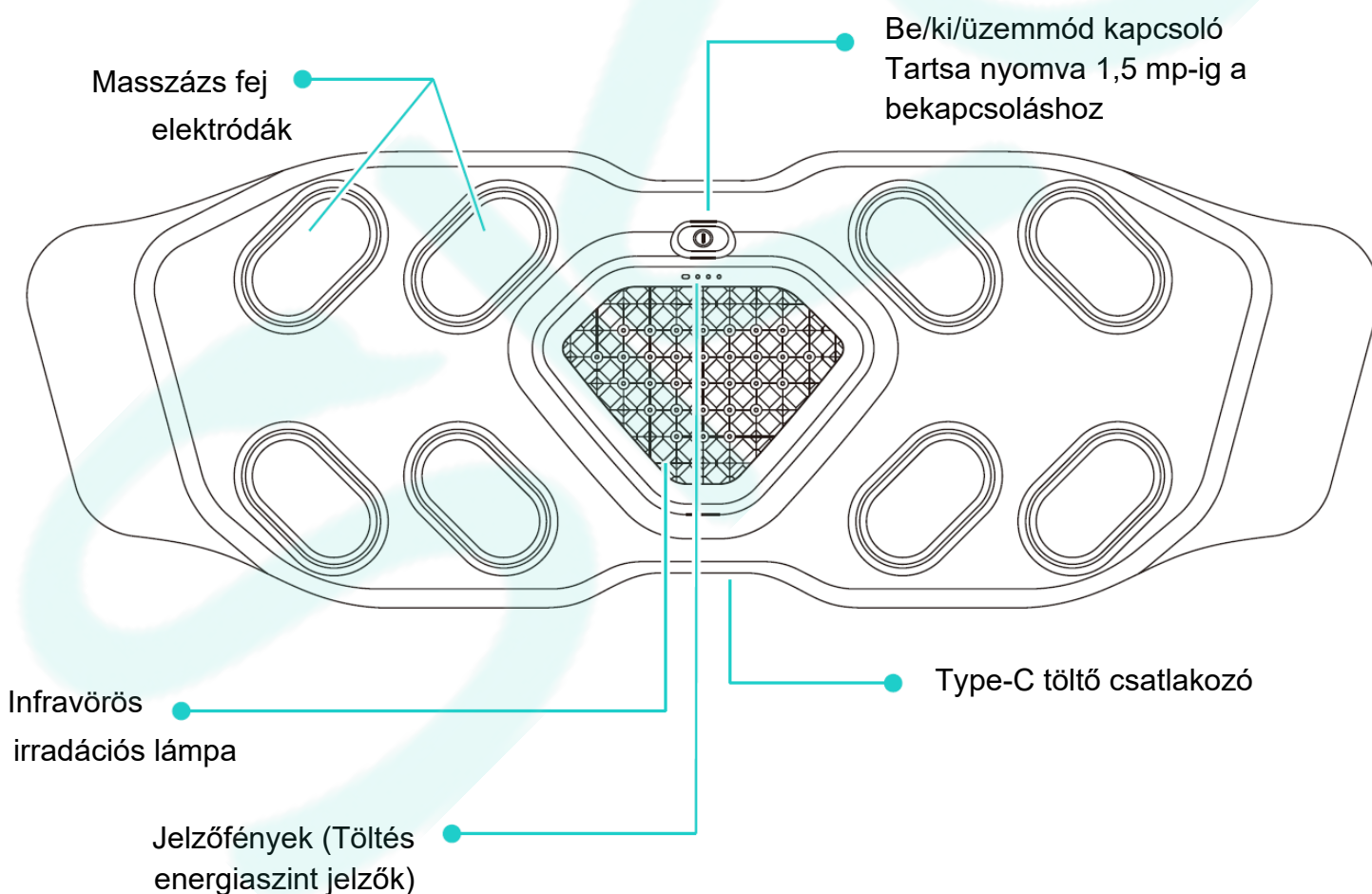

Teljes töltöttségnél mind a négy fény világít. A fehéren világító fények száma jelzi az akkumulátor energiaszintjét. Ha csak egy jelzőfény világít vörösén, az alacsony energiaszintet jelent. Töltse fel az akkumulátort.

## HASZNÁLAT

1. A csomagolás kinyitása után töltsse le az „Future Wear” alkalmazást (az okos funkciók beállításához). Ha vásárolt távvezérlőt, akkor használja az öv vezérléséhez. (A távvezérlő használatához nézze át a távvezérlő csomagolásában található használati utasítást.)

2. Tartsa nyomva a Be/kikapcsoló gombot 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz. Ha az elektródák felmelegedtek, helyezze a készüléket a derekára és szorítsa meg a szíjat. Így az elektródák szorosan érintkezni tudnak a bőrfelülettel (ha a bőre száraz, nedvesítse meg használat előtt.)

3. Indítsa el az alkalmazást a további beállításokhoz, pl intenzitás, üzemmód és melegítés vezérlés.

4. Vegye le az övet használat után.

## FUTURE WEAR ALKALMAZÁS

1. Töltsse le a „Future Wear” alkalmazást az alkalmazás boltból vagy olvassa be a QR kódot




A Google Play és a Google Play logo a Google Inc., bejegyzett védjegye. Az Apple és az Apple logo az Apple Inc., bejegyzett védjegye.

2. Regisztráljon és lépjen be az alkalmazásba



3. Kapcsolja be a készüléket és a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon, majd adja hozzá az eszközt a „Future Wear” alkalmazáshoz.

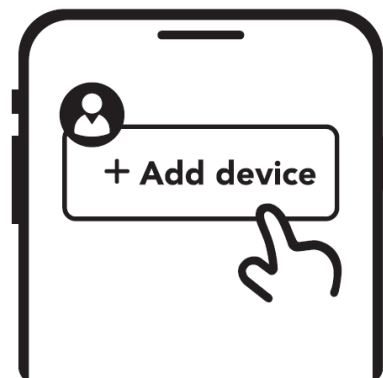





# HULLADÉK-KEZELÉS

## Akkumulátor

Támogassa az akkumulátor újrahasznosítását (lithium-ion akkumulátor)

 <p>Veszély</p>	<p>A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használja más termékben. Ne töltsse fel a kiszereelt akkumulátort</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne dobja tűzbe vagy melegítse fel.</li><li>• Ne szűrje meg túvel, üsse meg vagy próbálja meg szétszerelni.</li><li>• Ne okozzon rövidzárlatot fém érintkezéssel.</li><li>• Ne tárolja nyaklánc vagy hajtű mellett.</li><li>• Ne töltsse, használja vagy helyezze tűz közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb magas hőmérsékletnek.</li></ul> <p>A fentiek melegegést, tüzet vagy robbanást okozhatnak</p>
 <p>Figyelmeztetés</p>	<p>A kiszereelt akkumulátort gyermekek által nehezen elérhető helyen tárolja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Véletlen lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz!</li><li>• Az akkumulátorból szivárgó folyadékot ne érintse meg és az alábbiak szerint kezelje:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék szembe kerül, az vakságot okozhat. Ne érintse meg a szemét közvetlenül a kezével. Mossa meg a szemét vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, irritációt és sérülést okozhat. Mossa meg vízzel és ha a kellemetlen érzés megmarad, azonnal forduljon orvoshoz.</li><li>○ Csak selejtezés esetén bontsa meg az akkumulátort, melyet csak szakember végezhet! Ellenkező esetben sérülést, áramütést és tüzet okozhat. Javítási igény esetén forduljon szakszervizhez.</li></ul></li></ul>

A készülékben használt lithium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak és értékes erőforrások. Ha az akkumulátor elhasználódott adja át megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetnek újrahasznosításra.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladék-kezelése esetén.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása előtt.
- Az akkumulátor eltávolításakor figyeljen a biztonsági előírásokra.